



Bisturi monouso "Crescent knife"



La linea di bisturi per chirurgia oftalmologica FEATHER® è prodotta in acciaio inossidabile di alta qualità di grado medicale utilizzando una tecnologia di affilatura ad alta precisione.

La tecnologia di affilatura ottimizzata e l'accurata selezione dei materiali consentono la produzione di lame con bordi di taglio regolari ed ultra affilati.

Il processo di produzione standardizzato garantisce una dimensione costante dell'incisione minimizzando il rischio di lesioni tissutali durante l'incisione.

Questo rende i bisturi realizzati da FEATHER®, produttore di lame di fama mondiale, strumenti di precisione ideali, con la garanzia di assoluta sicurezza sia per gli utilizzatori che per i pazienti. Tutti i bisturi sono sterilizzati a raggi gamma e pronti per l'uso subito dopo l'apertura della confezione.

Tutte le impugnature sono progettate per avere un peso ottimale per garantire una presa e manipolazione sicura dello strumento.


Tutti i microbisturi FEATHER® sono disponibili con manico in alluminio, impugnatura in plastica o manico Safeshield™ per rispondere alle diverse esigenze di tutti i chirurghi.

I manici sono codificati per colore per facilitare l'identificazione del tipo di lama e dell'angolo di taglio.

La linea di bisturi per chirurgia oftalmologica FEATHER® è stata progettata per consentire al chirurgo di ridurre al minimo la pressione esercitata sui tessuti oculari durante gli interventi chirurgici ed è caratterizzata dall'elevata qualità dei materiali e dall'accuratezza della lavorazione.

Le lame sono prodotte in acciaio inossidabile di grado medicale.

I manici sono fabbricati in ABS (Acrilonitrile Butadiene Stirene).

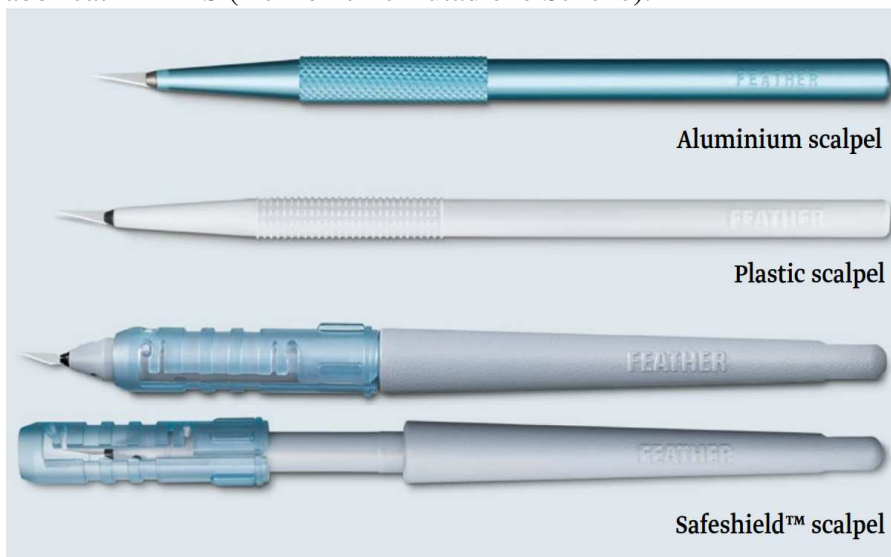

Nome Commerciale

Micro Feather bisturi monouso per chirurgia oftalmologica.

Indicazioni d'uso

Interventi di chirurgia oftalmica.

Grazie alla lame ultra affilate con i lati dritti e la punta arrotondata, i bisturi a mezzaluna FEATHER® sono perfetti per creare lembi di tunnel sclerale.

Vantaggi

Guarigione ottimale della ferita e qualità dell'incisione grazie al design unico della lama.

Avvertenze

Bisturi per utilizzo medico. Maneggiare con cura.

Sterilizzazione

Irradiazione Raggi Gamma 25kGy (R).

Confezionamento

Ogni confezione contiene 5 microbisturi.

Ogni microbisturi è disponibile in custodia protettiva in policarbonato, singolarmente racchiusa in apposita busta sterile.



Validità

5 anni dalla data del confezionamento.

Conservazione

A temperatura ambiente. Non richiede specifico posizionamento della confezione.

Presenza di lattice naturale o derivati

Latex Free.

Descrizione Prodotto

Codice Prodotto

Codice Fabbricante

Numero di registrazione Banca Dati Dispositivi Medici

Bisturi sterile monouso Feather "Crescent Knife" manico plastica lama angolata 45° larghezza 2,6 mm Bi Bevel

FHP7926B

P7926B

56457/R

Bisturi sterile monouso Feather "Crescent Knife" manico plastica lama angolata 45° larghezza 2,6 mm Bevel Up

FHP7926BU

P7926BU

56460/R

Dispositivo invasivo di tipo chirurgico - Classe IIa - Rif. 2.2 Regola 6 All. IX del D.L. 46/97

Classificazione Nazionale Dispositivi Medici CND - Codice Q02010102

Fabbricante

Feather Safety Razor CO. Ltd - Medical Division - Japan

Mandatario

pfm medical ag - Germany

Distributore autorizzato

C.B. Medical S.r.l.

CB MEDICAL
QUALITY AND INNOVATION IN MEDICAL DEVICES SINCE 1982



C.B. Medical Srl – Viale Europa 78, 20047 Cusago (MI) - Tel. 02 48601166 - Fax 02 48600290
PEC: cbmedical@legalmail.it - email: cbmedical@cbmedical.com – www.cbmedical.com

Rev. 2-23/07/2020