


Lame microchirurgiche curve


K-5400




K-5410

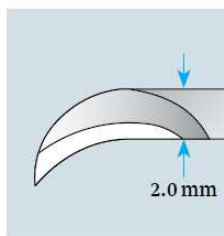


K-5420

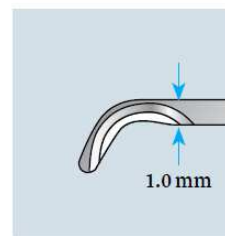

K-5411

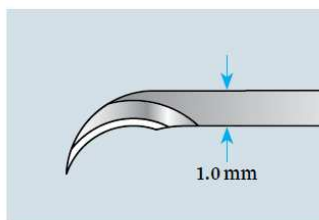

K-5421

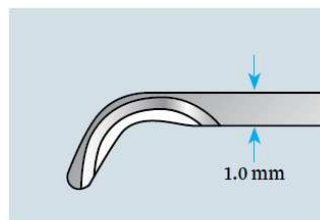

Gli strumenti microchirurgici FEATHER® costituiscono un ideale sistema di strumenti con lame e manici intercambiabili ideali per un lavoro flessibile ed efficiente durante le procedure microchirurgiche.

Le lame FEATHER® per microchirurgia sono prodotte in acciaio inossidabile di alta qualità di grado medico utilizzando una tecnologia di affilatura ad alta precisione.

La tecnologia di affilatura ottimizzata e l'accurata selezione dei materiali consentono la produzione di lame con bordi di taglio regolari e ultra affilati.

Il processo di produzione standardizzato garantisce una dimensione costante dell'incisione minimizzando il rischio di lesioni tissutali durante l'incisione.

Questo rende lame e manici realizzati da FEATHER®, produttore di lame di fama mondiale, strumenti di precisione ideali, con la garanzia di assoluta sicurezza sia per gli utilizzatori che per i pazienti. Tutte le lame sono sterilizzate a raggi gamma e pronte per l'uso subito dopo l'apertura della confezione.

Una punta affilata di precisione realizzata su acciaio inossidabile di grado medico e una forma molto originale garantiscono un'eccellente facilità d'uso e un'efficienza di lavoro che difficilmente può essere fornita da lame convenzionali.

I manici sono realizzati in lega di titanio e sono tutti disponibili in diverse forme e dimensioni per soddisfare le esigenze dei chirurghi. Tutte le impugnature sono progettate per avere un peso ottimale per garantire una presa sicura e una manipolazione sicura dello strumento.

- ▶ Lame speciali per microchirurgia
- ▶ Gamma completa con diversi tipi di lame e manipoli; disponibili come un sistema
- ▶ Contenitore di plastica per proteggere la punta
- ▶ Confezionato sigillato e poi sterilizzato ai raggi gamma
- ▶ Immediatamente pronto per l'uso dopo l'apertura della confezione



Nome Commerciale

Feather lama per incisioni di precisione

Indicazioni d'uso

Interventi di neurochirurgia

Caratteristiche

Le lame microchirurgiche FEATHER® K-5400, K-5410 e K-5420 sono lame curve ultra affilate con e senza punta arrotondata per microincisioni e possono essere utilizzate per la dura madre della colonna vertebrale. La punta della lama fornisce un taglio particolarmente netto.

Le lame microchirurgiche FEATHER® K-5411 e K-5421 sono lame curve ultra affilate per microincisioni ed utilizzabili per varie applicazioni. In particolare la lama K-5421 ha una punta smussata ed è ottima per la manipolazione dei tessuti.

Il bisturi è dotato di protezione di sicurezza anti taglio, rimovibile all'atto dell'impiego.

Avvertenze

Bisturi per utilizzo medicale. Maneggiare con cura.

Sterilizzazione

Irradiazione Raggi Gamma 25kGy (R).

Possibilità di sterilizzazione in autoclave

La custodia in plastica è realizzata in resina autoclavabile che permette di sterilizzare la lama in autoclave mentre si trova nella custodia.

La sterilità è garantita dal particolare tipo di confezione in foglio di alluminio, di pratico impiego, entro i limiti di scadenza indicati. Eventuali alterazioni della confezione pregiudicano la sterilità del prodotto.

Ciascuna lama può essere sterilizzata in autoclave ed essere riutilizzata sotto la responsabilità del chirurgo. Il numero di casi per strumento dipende dalla modalità di impiego e di manipolazione del bisturi.

Un'efficace pulizia/disinfezione costituisce il prerequisito indispensabile per un'efficace risterilizzazione dei prodotti. Assicurarsi che per la pulizia/disinfezione e la sterilizzazione vengano utilizzati esclusivamente processi specifici per il dispositivo/prodotto opportunamente omologati e che i parametri convalidati vengano rispettati in ciascun ciclo.

Prima di riutilizzare il prodotto, ispezionare visivamente il manico ed esaminare la lama al microscopio. Non riutilizzare qualora il prodotto risulti danneggiato.

Pulizia e disinfezione

Pulizia manuale

- Pulire il bisturi con acqua distillata o sterile subito dopo l'uso.
- Utilizzare un pezzo di garza o altro materiale simile e pulire delicatamente la lama dal gambo verso la punta, partendo dal bordo tagliente.
- Posizionare la lama nel contenitore in plastica e rimuovere il manico.

Pulizia meccanica

Se disponibile, pulire/disinfettare la lama/il manico meccanicamente utilizzando una soluzione alcalina (pH>10, minimo 55°C) o in alternativa pulire la lama in un bagno ad ultrasuoni.

Asciugatura

- Collegare la lama e il manico e asciugarli completamente. Utilizzare un pezzo di garza o altro materiale simile. Asciugare delicatamente la lama dal gambo verso la punta, partendo dal bordo tagliente.
- Riporre la lama nel contenitore in plastica e rimuovere il manico dalla lama. Assicurarsi che la lama sia fissata saldamente.

Risterilizzazione

Risterilizzare la lama mediante autoclave (temperatura a 134°C, tempo di esposizione minimo: 5 minuti in caso di prodotti puliti meccanicamente con soluzione alcalina oppure 18 minuti qualora i prodotti non siano stati puliti con una soluzione alcalina).

Confezionamento

Ogni confezione contiene 5 microlame sterili.

Ogni microlama è disponibile in custodia protettiva in policarbonato, singolarmente racchiusa in apposita busta sterile.

Validità

5 anni dalla data del confezionamento indicata sulla singola confezione.

Conservazione

A temperatura ambiente. Non richiede specifico posizionamento della confezione.


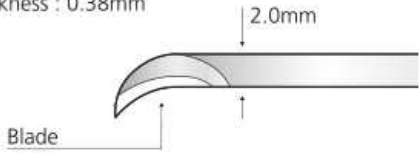

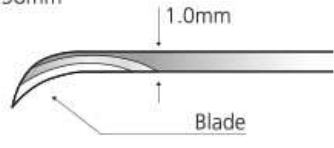

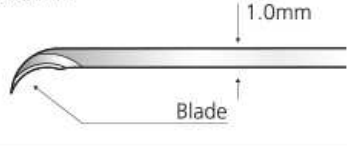

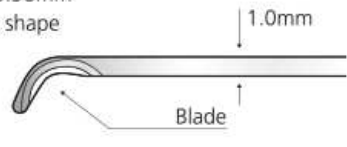

Presenza di lattice naturale o derivati

Assenza di lattice e ftalati

Descrizione Prodotto	Codice Prodotto	Codice Fabbricante	Numero di registrazione Banca Dati Dispositivi Medici
Lama Feather microchirurgica curva ultra affilata spessore lama 0,38 mm, larghezza 2,0 mm	PFNK5400	K-5400	70589/R
Lama Feather microchirurgica curva ultra affilata spessore lama 0,38 mm, larghezza 1,0 mm	PFNK5410	K-5410	70591/R
Lama Feather microchirurgica curva ultra affilata spessore lama 0,38 mm, larghezza 1,0 mm	PFNK5411	K-5411	414602/R
Lama Feather microchirurgica curva ultra affilata spessore lama 0,38 mm, larghezza 1,0 mm punta arrotondata	PFNK5420	K-5420	70592/R
Lama Feather microchirurgica curva ultra affilata spessore lama 0,38 mm, larghezza 1,0 mm punta arrotondata	PFNK5421	K-5421	414603/R


Dispositivo invasivo di tipo chirurgico - Classe IIa - Rif. 2.2 Regola 6 All. IX del D.L. 46/97

Classificazione Nazionale Dispositivi Medici CND - Codice L010102 - Lame per Bisturi

K-5400	 <p>Curve blade</p>	<p>Blade thickness : 0.38mm</p>  <p>Blade</p>
K-5410	 <p>Curve blade</p>	<p>Blade thickness : 0.38mm</p>  <p>Blade</p>
K-5411	 <p>Curve blade</p>	<p>Blade thickness : 0.38mm</p>  <p>Blade</p>
K-5420	 <p>Curve blade</p>	<p>Blade thickness : 0.38mm Blade tip in round shape</p>  <p>Blade</p>
K-5421	 <p>Curve blade</p>	<p>Blade thickness : 0.38mm Blade tip in round shape</p>  <p>Blade</p>

Modalità di inserzione del bisturi nel manico

Assembly instructions

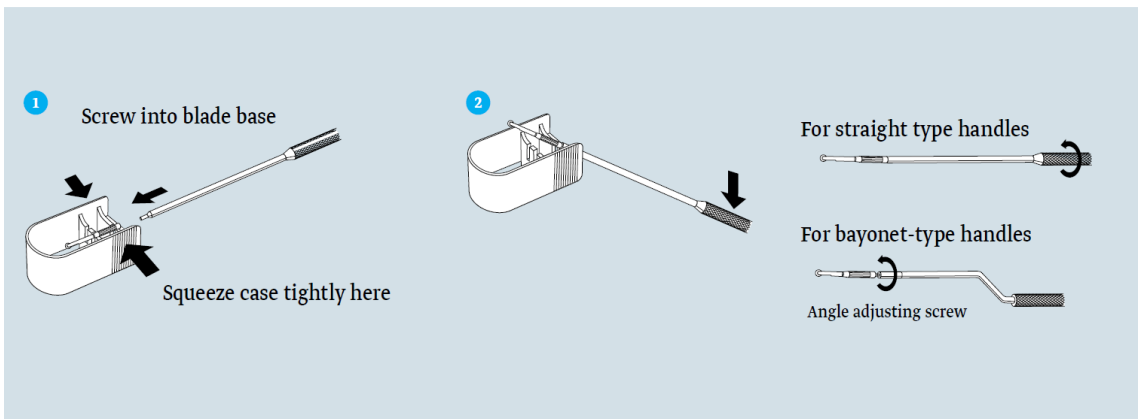

Fabbricante

Feather Safety Razor CO. Ltd - Medical Division - Japan

Mandatario

pfm medical ag - Germany

Distributore autorizzato

C.B. Medical S.r.l.

CB MEDICAL 

QUALITY AND INNOVATION IN MEDICAL DEVICES SINCE 1982

FEATHER 

C.B. Medical Srl – Viale Europa 78, 20047 Cusago (MI) - Tel. 02 48601166 - Fax 02 48600290
 PEC: cbmedical@legalmail.it - email: cbmedical@cbmedical.com – www.cbmedical.com

Rev. 5-06/07/2020