

Rimuovi lama – Feather® Blade Remover



Blade Remover Feather



Blade Remover Mini Feather

Il FEATHER® Blade Remover è un dispositivo in polipropilene per la rapida e semplice rimozione delle lame chirurgiche monouso di qualsiasi tipo e dimensione di manico di bisturi. Evita il diretto contatto con le lame garantendo maggiore igiene e sicurezza ed è utilizzabile per ogni tipo di lame e di manici.

Nome Commerciale

Feather Blade remover

Indicazioni d'uso

Rimozione delle lame chirurgiche monouso dai manici

Vantaggi

Facilità d'uso: Il FEATHER® Blade Remover permette di rimuovere in modo semplice e sicuro le lame chirurgiche monouso usate da qualsiasi tipo e dimensione di manico di bisturi.

Sicuro e igienico: evita il contatto diretto con le lame e garantisce la massima protezione possibile del personale medico contro le infezioni.


Prodotto usa e getta: Una volta riempito con lame usate, il dispositivo di rimozione lame può essere semplicemente smaltito.

Manipolazione

Assicurarsi che il lato corretto della lama sia rivolto verso l'alto; quindi inserire la lama nella fessura del dispositivo di rimozione della lama fino a quando non colpisce l'arresto.

Premere delicatamente il pulsante sulla parte superiore del dispositivo di rimozione della lama.

Rimuovere il manico. La lama rimossa cade in modo sicuro nel dispositivo di rimozione della lama in dotazione.

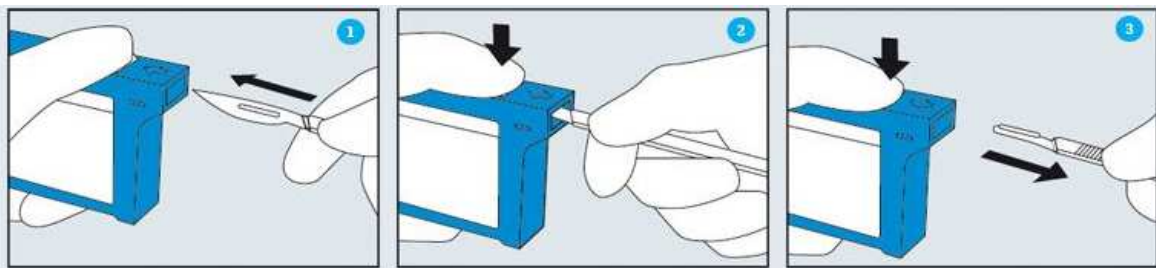

Avvertenze

Dispositivo per utilizzo medico. Maneggiare con cura.

Confezionamento

Ogni confezione contiene 1 dispositivo Blade Remover

Conservazione

A temperatura ambiente. Non richiede specifico posizionamento della confezione.

Caratteristiche tecniche

Dimensioni (L x H x P) = 79 x 58 x 25 mm

Peso (vuoto) = 21,7 g

Dimensioni massime delle lame = lunghezza 17 mm - larghezza 5,2 mm

Capacità = da 150 a 300 lame monouso

Presenza di lattice naturale o derivati

Latex Free.

Materiale informatico (video online)

dispositivo rimuovi lama <https://www.youtube.com/watch?v=dQoLQ0DietQ>

dispositivo rimuovi lama mini <https://www.youtube.com/watch?v=oXYpr2hEmPs>

Descrizione Prodotto	Codice Prodotto	Codice Fabbricante	Numero di registrazione Banca Dati Dispositivi Medici
Blade Remover Feather per la rimozione delle lame chirurgiche monouso	FHBR01	Blade Remover	-
Blade Remover Mini Feather (grandezza palmo della mano) per la rimozione delle lame chirurgiche monouso	FHBR01M	Blade Remover Mini	-

Dispositivo non invasivo - Classe I - Rif. 1.1 Regola 1 All. IX del D.L. 46/97
Classificazione Nazionale Dispositivi Medici CND - Codice V80

Fabbricante

Feather Safety Razor CO. Ltd - Medical Division - Japan

Mandatario

pfm medical ag - Germany

Distributore autorizzato

C.B. Medical S.r.l.

Il Decreto Ministeriale del 21 Dicembre 2009 pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana del 22 gennaio 2010, che ha sostituito integralmente il D.M. 20 febbraio 2007, illustra le nuove modalità per gli adempimenti per la registrazione dei DM e dei DM impiantabili attivi nella Banca Dati e nel Repertorio dei Dispositivi Medici. Il Decreto è in vigore dal 6 febbraio 2010.

Tale decreto è stato emanato per rispondere ad una nota della Commissione Europea, contenente alcune obiezioni sollevate da Fabbricanti esteri nei confronti delle Autorità Competenti italiane, tra le quali l'obbligo di registrare anche DM di Classe I.

Il suddetto D.M. stabilisce che se i Fabbricanti o i loro Mandatari hanno sede legale in uno Stato Membro (esclusa l'Italia), la registrazione dei loro DM di classe I nella Banca Dati del Ministero della Salute non è più obbligatoria, sebbene possa essere effettuata su base volontaria, qualora i Fabbricanti lo desiderino.



C.B. Medical Srl – Viale Europa 78, 20047 Cusago (MI) - Tel. 02 48601166 - Fax 02 48600290
PEC: cbmedical@legalmail.it - email: cbmedical@cbmedical.com – www.cbmedical.com

Rev. 3-01/01/2020