


## Bisturi monouso con dispositivo di sicurezza Safeshield

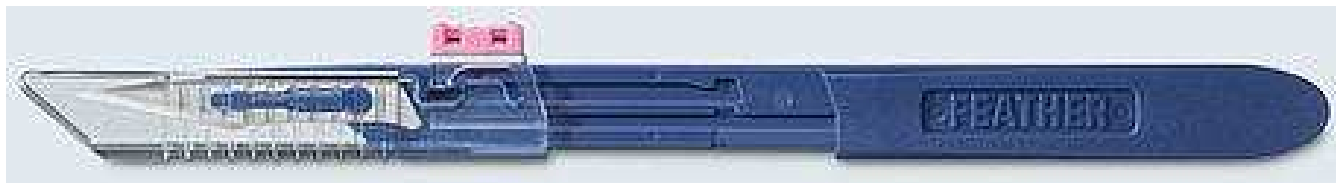

La linea di bisturi per chirurgia oftalmologica FEATHER® è prodotta in acciaio inossidabile di alta qualità di grado medico utilizzando una tecnologia di affilatura ad alta precisione.

La tecnologia di affilatura ottimizzata e l'accurata selezione dei materiali consentono la produzione di lame con bordi di taglio regolari ed ultra affilati.

Il processo di produzione standardizzato garantisce una dimensione costante dell'incisione minimizzando il rischio di lesioni tissutali durante l'incisione.

Questo rende i bisturi realizzati da FEATHER®, produttore di lame di fama mondiale, strumenti di precisione ideali, con la garanzia di assoluta sicurezza sia per gli utilizzatori che per i pazienti. Tutti i bisturi sono sterilizzati a raggi gamma e pronti per l'uso subito dopo l'apertura della confezione.

Tutte le impugnature sono progettate per avere un peso ottimale per garantire una presa e manipolazione sicura dello strumento.

I manici sono codificati per colore per facilitare l'identificazione del tipo di lama e dell'angolo di taglio.

La linea di bisturi per chirurgia oftalmologica FEATHER® è stata progettata per consentire al chirurgo di ridurre al minimo la pressione esercitata sui tessuti oculari durante gli interventi chirurgici ed è caratterizzata dall'elevata qualità dei materiali e dall'accuratezza della lavorazione.

Le lame sono prodotte in acciaio inossidabile di grado medico.

I manici sono fabbricati in ABS (Acrilnitrile Butadiene Stirene).



### Nome Commerciale

Feather bisturi monouso Safeshield.

### Indicazioni d'uso

Interventi invasivi e taglio tessuti in chirurgia, uso a breve termine.

### Caratteristiche

**Safeshield:** la linea di bisturi monouso con dispositivo di protezione della lama per ridurre al minimo i rischi e garantire agli operatori la massima sicurezza.

Il dispositivo di sicurezza dei bisturi FEATHER Safeshield è integrato nel sistema del bisturi e non è un accessorio separato da esso. Poiché il meccanismo viene attivato con una mano sola, non richiede alcun cambiamento nella tecnica dell'operatore sanitario e consente il pieno controllo della procedura.

Questo include anche la possibilità di riutilizzare il bisturi durante la stessa procedura per ulteriori tagli. Il meccanismo di sicurezza una volta attivato è percepibile da un suono tipo "click". Il meccanismo di sicurezza non è facilmente reversibile, in quanto è necessario premere attivamente il tasto colorato per spingere indietro la protezione della lama.

Inoltre, questo dispositivo non compromette la cura del paziente né crea altri pericoli per la sicurezza.

### **Vantaggi**

- Sistema di protezione lama attivabile con una sola mano
- Dispositivo di protezione della lama integrato nel bisturi.
- Indicazione visiva, tattile e sonora del sistema di blocco
- Codice colore sul tasto di attivazione della protezione della lama per facilitare l'identificazione del tipo di lama e dell'angolo di taglio.
- Mantenimento automatico della posizione di protezione
- Dispositivo di protezione della lama retrattile trasparente per consentire in ogni istante il controllo della posizione della lama di taglio
- La protezione trasparente può essere avanzata (per coprire la lama) e retratta più volte applicando contemporaneamente pressione sul tasto di attivazione della protezione. La protezione pertanto non è facilmente reversibile.
- Prodotto conforme al Decreto Legislativo N° 19 del 19/01/2014 (Direttiva 2010/32/EU) e alle linee guida dell'European Biosafety Network.
- Blocco di protezione difficilmente reversibile per smaltimento sicuro secondo normativa
- Disponibile nelle classiche figure dei bisturi tradizionali
- Tutte le impugnature sono progettate per avere un peso ottimale per garantire una presa e manipolazione sicura dello strumento in ABS (Acrilnitrile Butadiene Stirene).
- Lama in acciaio inossidabile di grado medicale

### **Avvertenze**

Bisturi per utilizzo medicale. Maneggiare con cura.

### **Sterilizzazione**

Irradiazione Raggi Gamma 25kGy (R).

### **Confezionamento**

Ogni confezione contiene 10 bisturi monouso.

Ogni bisturi è singolarmente racchiuso in apposito foglio di accoppiato plastica/carta sterile.

### **Validità**

5 anni dalla data del confezionamento.

### **Conservazione**

A temperatura ambiente. Non richiede specifico posizionamento della confezione.

### **Presenza di lattice naturale o derivati**

Latex Free.

### **Materiale informatico (video online)**


<https://youtu.be/WEm4lrpUPUo>

<https://www.youtube.com/watch?v=WfHTH1EvQmQ>

<b>Descrizione Prodotto</b>	<b>Codice Prodotto</b>	<b>Codice Fabbricante</b>	<b>Numero di registrazione Banca Dati Dispositivi Medici</b>
Bisturi Feather Safeshield Figura 10 manico lunghezza 140 mm sterile monouso	FHS10	10SS	75445/R
Bisturi Feather Safeshield Figura 11 manico lunghezza 140 mm sterile monouso	FHS11	11SS	75626/R
Bisturi Feather Safeshield Figura 14 manico lunghezza 140 mm sterile monouso	FHS14	14SS	75627/R
Bisturi Feather Safeshield Figura 15 manico lunghezza 140 mm sterile monouso	FHS15	15SS	75628/R
Bisturi Feather Safeshield Figura 15C manico lunghezza 140 mm sterile monouso	FHS15C	15CSS	75629/R
Bisturi Feather Safeshield Figura 20 manico lunghezza 140 mm sterile monouso	FHS20	20SS	75630/R
Bisturi Feather Safeshield Figura 21 manico lunghezza 140 mm sterile monouso	FHS21	21SS	75631/R
Bisturi Feather Safeshield Figura 22 manico lunghezza 140 mm sterile monouso	FHS22	22SS	75632/R
Bisturi Feather Safeshield Figura 23 manico lunghezza 140 mm sterile monouso	FHS23	23SS	75634/R
Bisturi Feather Safeshield Figura 24 manico lunghezza 140 mm sterile monouso	FHS24	24SS	75635/R
Bisturi Feather Safeshield Figura 25 manico lunghezza 140 mm sterile monouso	FHS25	25SS	75636/R

Dispositivo invasivo di tipo chirurgico - Classe IIa - Rif. 2.2 Regola 6 All. IX del D.L. 46/97

Classificazione Nazionale Dispositivi Medici CND - Codice V0101

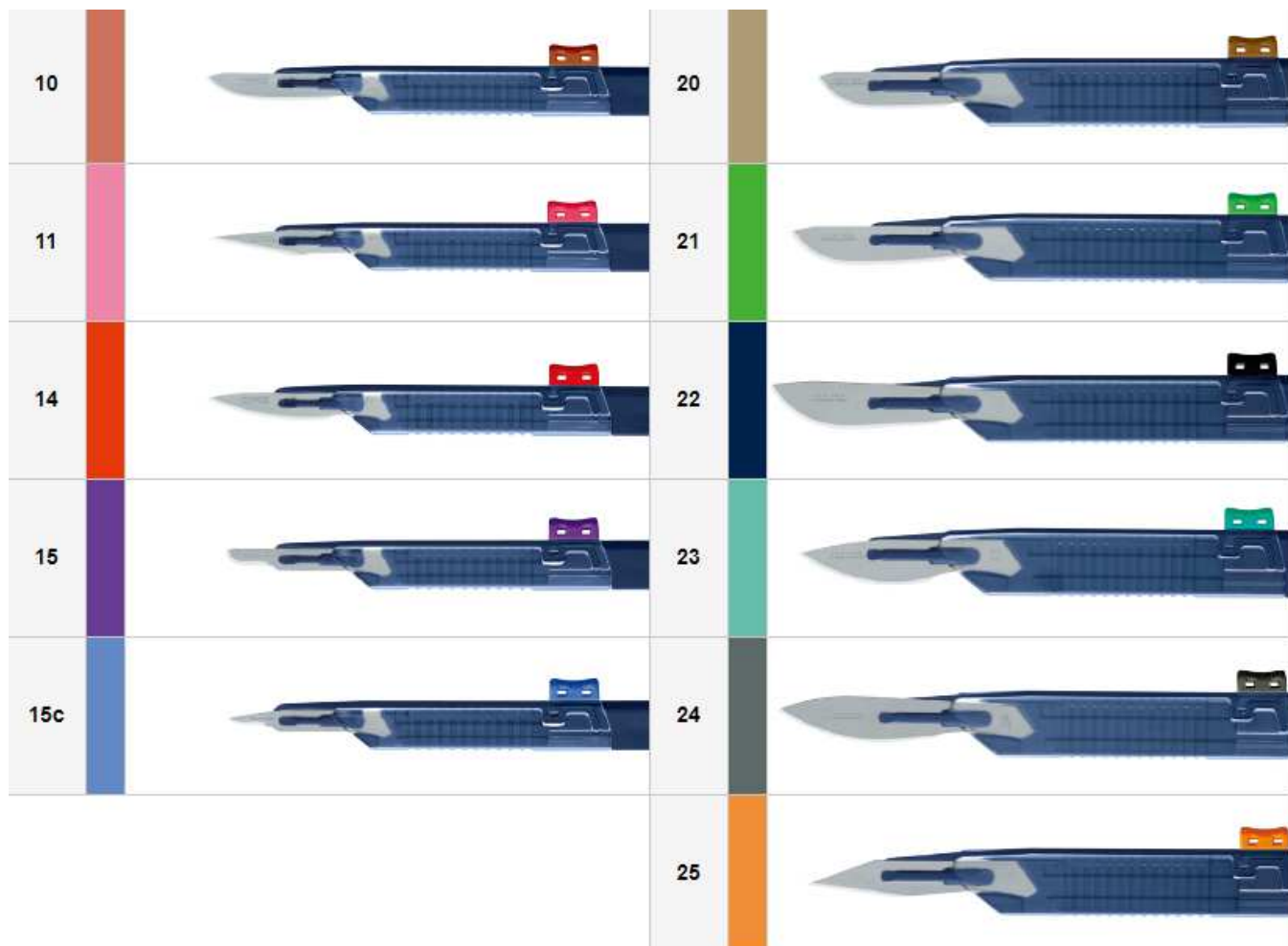

**Fabbricante**

Feather Safety Razor CO. Ltd - Medical Division - Japan

**Mandatario**

pfm medical ag - Germany

**Distributore autorizzato**

C.B. Medical S.r.l.

**CB MEDICAL**   
QUALITY AND INNOVATION IN MEDICAL DEVICES SINCE 1982



**C.B. Medical Srl** – Viale Europa 78, 20047 Cusago (MI) - Tel. 02 48601166 - Fax 02 48600290  
 PEC: [cbmedical@legalmail.it](mailto:cbmedical@legalmail.it) - email: [cbmedical@cbmedical.com](mailto:cbmedical@cbmedical.com) – [www.cbmedical.com](http://www.cbmedical.com)

Rev. 3-01/01/2020