



Cannule per chirurgia estetica Silkann

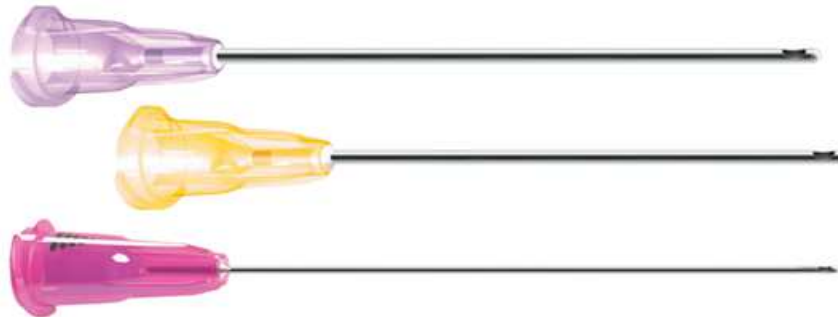

La forma del foro laterale della cannula Sterimedix corrisponde al diametro della cannula per ottimizzare il controllo e il flusso del filler.

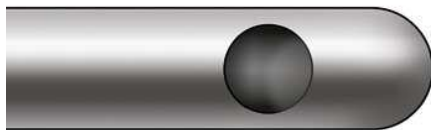

Foro laterale standard



pareti ultra sottili



pareti di una cannula standard

Gli aghi cannula Sterimedix sono prodotti in acciaio inossidabile di grado medicale, silicone e polipropilene copolimerizzato. I connettori sono di tipo Luer Lock.

Le cannule Silkann sono realizzate secondo i più alti standard per garantire un'esperienza di utilizzo che aiuti ad ottenere il miglior risultato possibile per i vostri pazienti.

Le cannule Silkann sono realizzate per garantire che il flusso di iniezione sia ideale per l'utente e il paziente.

Le cannule Silkann hanno un esclusivo connettore in policarbonato che presenta una filettatura per ridurre il rischio di distacco sotto pressione. Il connettore è compatibile con tutti i tipi di siringhe per filler. È presente inoltre un indicatore sul connettore per mostrare l'orientamento del foro laterale.

Le pareti ultra sottili della cannula Sterimedix aumentano il diametro interno della cannula e riducono le forze di iniezione.

La forma del foro laterale della cannula Sterimedix corrisponde al diametro della cannula per ottimizzare il controllo e il flusso del filler.

Nome Commerciale

Cannula monouso per chirurgia estetica.

Indicazioni d'uso

Somministrazione, infiltrazione e riempimento a livello sottocutaneo.

Avvertenze

Dispositivo per utilizzo medico. Maneggiare con cura.

Sterilizzazione

Ossido di Etilene (EO).

Confezionamento

Confezionamento primario = 1 pezzo. Ogni cannula monouso è confezionata singolarmente in custodia protettiva sterile.

Confezionamento secondario = Scatola da 40 pezzi.

A richiesta sono disponibili altri tipi di confezionamento secondario.

Validità

5 anni dalla data del confezionamento.

Conservazione

A temperatura ambiente. Non richiede specifico posizionamento della confezione.

Presenza di lattice naturale o derivati

Latex Free.

Descrizione Prodotto

Codice Prodotto	Codice Fabbricante	Numero di registrazione Banca Dati Dispositivi Medici
-----------------	--------------------	---

Cannula monouso 18 gauge (1,25 mm) lunghezza 70 mm retta flessibile parete ultra sottile foro laterale - indicatore sul connettore - filettatura fine connettore luer lock a due partenze

SM1701

AJ1701

1133946/R

Cannula monouso 18 gauge (1,25 mm) lunghezza 70 mm retta flessibile parete ultra sottile foro laterale - connettore filettatura a vite

SM1702

AE1702

723690/R

Cannula monouso 20 gauge (0,90 mm) lunghezza 60 mm retta flessibile parete ultra sottile foro laterale - connettore filettatura a vite


SM1711

AE1711

1133947/R

Dispositivo invasivo di tipo chirurgico - Classe IIa - Rif. 2.2 Regola 6 All. IX del D.L. 46/97

Classificazione Nazionale Dispositivi Medici CND - Codice A019013

			
AJ 1701	18g UTW x 70mm	Straight dermal cannula with fine thread, two-start hub, closed end and single side port	Box 40

			
AE 1702	18g UTW x 70mm	Straight fat transfer cannula with screw thread hub, closed end and single side port	Box 40

			
AE 1711	20g UTW x 60mm	Straight fat transfer cannula with screw thread hub, closed end and single side port	Box 40

Fabbricante

Sterimedix Ltd - UK

Distributore autorizzato

C.B. Medical S.r.l.

