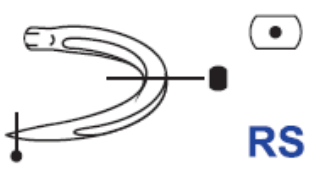
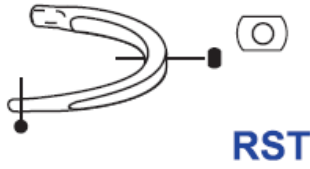
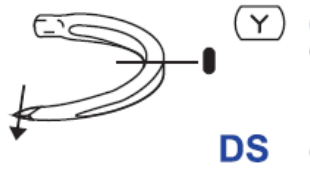
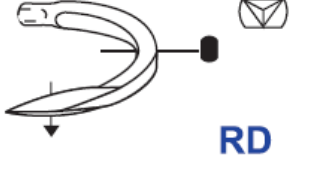
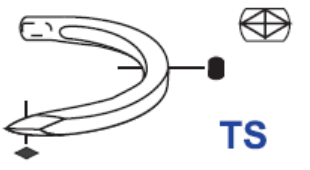
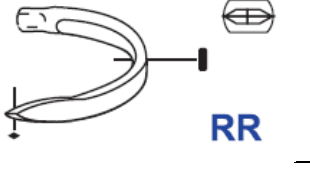

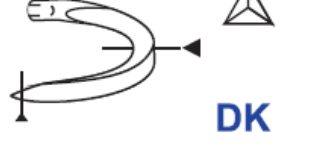

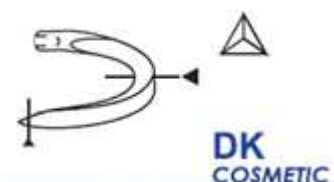

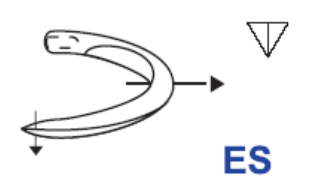
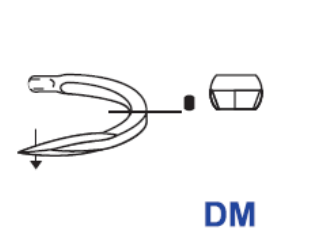
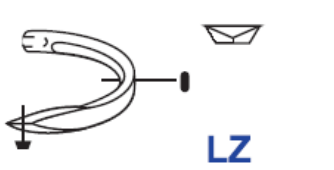


Aghi disponibili:

	<p>Ago rotondo Separazione delicata dei lembi di tessuto. Diversi diametri di aghi rotondi (aghi sottili e robusti) li rendono adatti sia per la cucitura di tessuti morbidi che più duri come i muscoli. L'appiattimento nella parte del supporto garantisce un migliore controllo dell'ago.</p>
	<p>Ago tondo smussato Così chiamato ago sicuro per i tessuti molto molli o fragili, la punta speciale dell'ago impedisce il danno del tessuto, principalmente usato per cucire gli organi parenchimali come reni o fegato.</p>
	<p>Ago rotondo con un bordo tagliente (affilato) Progettato per procedure chirurgiche, dove è necessaria solo una minima traumatizzazione dei tessuti ma comunque una perfetta penetrazione, meglio che nel caso di aghi rotondi. Garantisce una facile penetrazione, ad esempio, dei vasi sanguigni calcificati</p>
	<p>Ago da taglio rotondo (affilato) Lama allungata e robusta con un appiattimento rotondo nella parte del supporto; l'ago passa facilmente attraverso i tessuti duri</p>
	<p>Ago rotondo con un bordo a trocar Ago tagliente rotondo con quattro bordi; passa facilmente attraverso i tessuti duri</p>
	<p>Ago separatore rotondo Ago rotondo con lama appiattita per una perfetta separazione e penetrazione dei tessuti con minima traumatizzazione</p>
	<p>Ago nero Le sue proprietà antiriflesso garantiscono una perfetta visibilità in campo sterile</p>
	<p>Ago da taglio Profilo a triangolo, con tre bordi di taglio, dove il terzo bordo corre lungo la curvatura interna, fondamentalmente utilizzato per cucire la pelle</p>
	<p>Ago da taglio inverso Profilo a triangolo, con tre bordi di taglio, dove il terzo bordo corre lungo la curvatura esterna, fondamentalmente utilizzato per cucire la pelle</p>

Aghi disponibili:

	<p>Ago da taglio estetica Profilo a triangolo, con tre bordi di taglio, dove il terzo bordo corre lungo la curvatura interna, fondamentale utilizzato per cucire la pelle. Per applicazioni in chirurgia plastica ed estetica.</p>
	<p>Ago da taglio inverso estetica Profilo a triangolo, con tre bordi di taglio, dove il terzo bordo corre lungo la curvatura esterna, fondamentale usato per cucire la pelle. Per applicazioni in chirurgia plastica ed estetica.</p>
	<p>Ago da taglio inverso cosmetico con una lama precisa (micropunta) La scelta migliore per la chirurgia plastica; lama precisa progettata per offrire nuovi vantaggi competitivi; due superfici di lama affilata e sottile offrono un ago più affilato e un danno minimo ai tessuti.</p>
	<p>Ago a lama P a taglio inverso. Con una punta speciale, profilo di taglio in 1/3 della lunghezza dell'ago e parte rimanente con il profilo ovale, appiattito per un migliore posizionamento nel porta ago, specialmente raccomandato per applicazioni in chirurgia plastica ed estetica. Le sue proprietà uniche lo rendono adatto anche per altre applicazioni.</p>
	<p>Spatola (ago a lancia) Raccomandato per la chirurgia oftalmica</p>