

Letto operatorio a comandi elettrici per chirurgia oftalmologica 5D8EYE



Progettato espressamente per la chirurgia oftalmologica, il letto operatorio a comandi elettrici 5D8EYE Hausted semplifica la movimentazione e il posizionamento del paziente in sala operatoria riducendo drasticamente i "tempi morti" ed assicurando al chirurgo una perfetta, ergonomica e confortevole posizione di lavoro.

Il letto operatorio 5D8EYE Hausted è una piattaforma chirurgica mobile non solo per la chirurgia oftalmologica, ma anche per procedure di chirurgia plastica e otorinolaringoiatriche.

Caratteristiche principali

- Supporto testa specifico per oftalmologia con esclusivo sistema di regolazione micrometrica ottenuto attraverso due manopole di facile accesso che consente di ottenere infiniti e precisi posizionamenti della testa e del collo.
- Il design della testa a basso profilo permette un eccellente accesso al sito sia per le procedure superiori che per le procedure laterali senza compromettere lo spazio per le gambe del chirurgo.

- Larghezza ridotta per facilitare lo sterzo e il posizionamento durante il trasporto e l'intervento chirurgico
- Pianale paziente a quattro sezioni in acciaio inox verniciato a polveri anticorrosione
- Materassi rimovibili, lavabili e sfoderabili in schiuma di polietilene ritorto ipoallergenica, radiotrasparente e resistente al fuoco. Un materasso Hausted Comfort Pad è di serie sulle barelle Hausted. I due strati di schiuma offrono un maggiore comfort per il paziente e le coperture in uretano estensibile a 4 vie e in vinile resistenti ai liquidi e all'umidità sono note per la loro durata e la facilità di pulizia fornendo la massima resistenza contro le fuoriuscite, le macchie gli odori.



- Paracolpi di sicurezza su tutto il perimetro della barella
- Sponde laterali Retracto in acciaio inossidabile ripiegabili a tre posizioni
- Avanzato sistema di controllo elettrico a doppia colonna per la regolazione dell'altezza, del trendelemburg e antitrendelemburg con comando tramite pedali posti su entrambi i lati della barella
- Controllo elettrico dell'inclinazione dello schienale e della sezione ginocchio/gambe
- Pulsantiera di comando multifunzione
- Pannello di comando multifunzione
- Inclinazione dello schienale con sblocco rapido di emergenza a comando manuale
- Base di disegno moderno termoformata senza saldature a due colonne con porta bombola e porta accessori, predisposta per consentire al chirurgo un agevole accesso sia lungo l'asse principale (ore 12) sia nel temporale
- Asta telescopica porta-flebo integrata nel pianale del letto
- Fascia di contenimento e sicurezza paziente con fibbia di chiusura
- Quattro ruote antistatiche indipendenti grande diametro
- Sistema di blocco rapido centrale ottenuto attraverso comandi a pedale posti su ciascuno dei quattro angoli della barella
- Quinta ruota centrale per agevolare la movimentazione in spazi ristretti
- Supporto testa pre/post-intervento per un maggior comfort del paziente durante il trasporto
- Batteria ricaricabile di mantenimento per le fasi di preparazione e movimentazione paziente. Il back-up della batteria consente funzioni di alimentazione quando non è collegato alla corrente.
- Predisposizione per il montaggio di rotaie laterali porta accessori (opzionali) quali: aste telescopiche porta flebo, poggibraccio paziente, supporto-polso chirurgo, diffusore di ossigeno, ecc.



Specifiche tecniche

- Dimensioni totali complessive (L x P) = 225 cm x 76 cm

C.B. Medical Srl – Viale Europa 78, 20047 Cusago (MI) - Tel. 02 48601166 - Fax 02 48600290
 PEC: cbmedical@legalmail.it - email: cbmedical@cbmedical.com – www.cbmedical.com

- Dimensioni pianale paziente (L x P) = 207 cm x 64 cm
- Regolazione altezza pianale = da 56 cm a 76 cm
- Trendelemburg e anti-trendelemburg = da 0 a 10°
- Inclinazione dello schienale = da 0° a 80°
- Inclinazione della sezione ginocchio/gambe = da 0° a 60°
- Sponde laterali Retracto (L x H) = 125 cm x 36 cm
- Diametro ruote = 203 mm (8")
- Portata massima = 327 Kg
- Peso (a vuoto) = 115 Kg (253 lbs)
- Alimentazione principale = monofase 220 VAC 50 Hz - 1,5 A max
- Alimentazione a batteria = interna con blocco batteria sigillato ricaricabile 24 VDC 4,5 Ah
- Ciclo ricarica batteria = 10% (6 minuti/ora)
- Grado di protezione IP = IPX4
- Classificazione EN60601-1 = Classe I Tipo B
- Conforme a Norme EN60601-1:1990 + A2:1995, EN60601-1-2:1993, MDD 93/42/EEC, CAN/CSA C22.2 NO 601.1-M90, UL2601, EMC 89/336/EEC

Materiale informatico (video online)

<https://www.youtube.com/watch?v=CWW3rxCHdHY>


Materassi

- Spessore materassino = 8 cm (3")
- Colore standard: blu navy in vinile
- Altri colori disponibili:
 - nero in uretano estensibile 4 vie
 - nero in vinile
 - altri colori (vedasi tabelle colori sottostanti) in vinile

Poiché giocano un ruolo sempre più importante nella selezione dei sistemi di movimentazione dei pazienti, l'aspetto, la vestibilità e la finitura delle poltrone procedurali utilizzate nelle strutture, i colori diventano parte integrante del processo di selezione: Hausted offre una varietà di opzioni di colore dei rivestimenti per la sua linea di poltrone chirurgiche della serie Patriot Plus Vinyl e Guardian EcoSense.

Patriot Plus

NEO

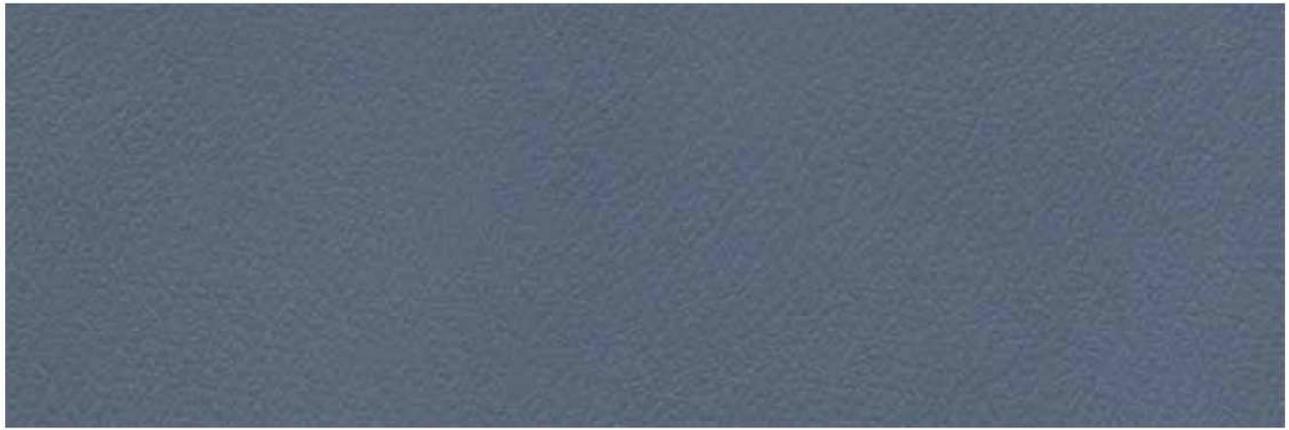

PAT-427 BLUERIDGE



PAT-8602
OATMEAL



PAT-8604
CONCRETE



PAT-8567
DOVE



PAT-454
ROYAL BLUE



PAT-432
IMPERIAL BLUE



PAT-8584
TAUPE



PAT-8516
CHESTNUT



PAT-8615
BERRY

Guardian | ecoSense[®] BY SPRADLING



GUA-1323 MOAT



GUA-1311
FENCE




GUA-1305
CONVOY



GUA-1304
LATCH



GUA-1325
ARMOR

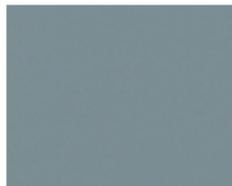

GUA-1318
STEEL



GUA-1319
SIREN



GUA-1314
CANOPY

Presenza di lattice naturale o derivati

Latex Free.

Descrizione Prodotto	Codice Prodotto	Codice Fabbricante	Numero di registrazione Banca Dati Dispositivi Medici
Letto operatorio a comandi elettrici per chirurgia oftalmologica	HA5D8EYE	5D8EYE	501506/R

Dispositivo attivo - Classe I - Rif. 3.3 Regola 12 All. IX del D.L. 46/97
Classificazione Nazionale Dispositivi Medici CND - Codice Z12011202 - Codice CIVAB TOP

Fabbricante

Hausted – by GF Health Products, Inc. - U.S.A.

Mandatario

CEPartner4U BV - Esdoornlaan 13 - 3951 DB, Maarn - The Netherlands

Distributore autorizzato

C.B. Medical S.r.l.



Letto operatorio a comandi elettrici per chirurgia oftalmologica 5D8EYE Accessori disponibili



Rotaia guida per accessori chirurgici

Serve per montare il poggibraccio braccio o gli altri accessori. Permette una migliore facilità d'uso e il posizionamento ottimale del paziente

Codice prodotto HASA4007
REF. HSA400700



Poggiabraccio regolabile completo di cuscino rimovibile e sfoderabile di 5 cm, morsetto e due rotaie laterali

Montaggio su guida per accessori chirurgici per una maggiore flessibilità nel posizionamento del paziente

Codice prodotto HASA4005
REF. HSA400500

Colore disponibile: nero



Comando a pedale elettrico (Post luglio 2013)

Permette facili regolazioni in altezza

Codice prodotto HASA0800
REF. HSA080000



Set poggiatesta sagomato da 5 cm, da 7,6 cm e da 10,2 cm

Codice prodotto HA0101ST

REF. H0101ST

Poggiatesta sagomato da 10,2 cm

Codice prodotto HASA063500B

REF. HSA063500B

Poggiatesta sagomato da 7,6 cm

Codice prodotto HAP150830448B

REF. HP150830448B

Poggiatesta sagomato da 5 cm

Codice prodotto HAP150830447B

REF. HP150830447B

Colore disponibile: blu navy



Asta portaflebo altezza fissa
rimovibile in acciaio (107 cm)

Codice prodotto HA000E17

REF. H000E1700

Asta telescopica portaflebo rimovibile
in acciaio (68 cm - 137 cm)

Codice prodotto HA000018

REF. H000018



Portabombola verticale - Conserva in
modo sicuro la bombola fuori dal
campo di procedura

Codice prodotto HA12845000

REF. H12845000

	<p>Sistema di somministrazione ossigeno OxyFlex II con supporto a piastra Codice prodotto HASA400600 REF. HSA400600</p> <p>Tubi monouso per diffusore di ossigeno OxyFlex II – confezione da 25 pezzi Codice prodotto HASA0080 REF. HSA008000</p>
	<p>Supporto per rotoli di carta Codice prodotto HA06925700 REF. H06925700</p>
	<p>Pediera con ripiano per monitor e portacartelle Il pannello versatile supporta un monitor/defibrillatore e un portacartelle Codice prodotto HA06883600 REF. H06883600</p>
	<p>Pediera con portacartelle La pedana fissa riduce al minimo lo scivolamento del paziente e consente un facile accesso alla cartella clinica del paziente Codice prodotto HA00CR6B REF. H00CR6B00</p>
	<p>Fasce di ritegno paziente con chiusura in velcro e fibbia Codice prodotto HA00001200 REF. H00001200</p>

	<p>Vassoio portaoggetti paziente rimovibile Codice prodotto HA065366 REF. H06536600</p>
	<p>Gruppo maniglia di spinta Forniscono un controllo extra, facili avviamenti e maggiore sicurezza per il personale Codice prodotto HA07565600 REF. H07565600</p>
	<p>Supporto a U per polso chirurgo rimovibile, regolabile Codice prodotto HASA0786 REF. HSA078600</p>
	<p>Supporto doppio per polso chirurgo rimovibile, regolabile a tre posizioni Codice prodotto HASA0785 REF. HSA078500</p>

Dispositivo attivo - Classe I - Rif. 3.3 Regola 12 All. IX del D.L. 46/97

I codici CND ed RDM da applicare agli accessori seguono la registrazione del dispositivo cui è destinato.

Fabbricante

Hausted – by GF Health Products, Inc. - U.S.A.

Mandatario

CEPartner4U BV - Esdoornlaan 13 - 3951 DB, Maarn - The Netherlands

Distributore autorizzato

C.B. Medical S.r.l.



C.B. Medical Srl – Viale Europa 78, 20047 Cusago (MI) - Tel. 02 48601166 - Fax 02 48600290
PEC: cbmedical@legalmail.it - email: cbmedical@cbmedical.com – www.cbmedical.com

Rev. 7-02/09/2020